

myQuickmat All-round

developed with **STYLE ITALIANO™**

neu!
embrace
simplicity

Vorteile

Bombierte Matrizen
für anatomische
Restaurationen

Komfortable
Matrizenpositionierung

Stabiles Spannen der
Matrizen

Leicht zu spannende
Matrizen

Hindernisfreies,
frei zugängliches
Operationsfeld

SPEZIELL VORGESEHEN FÜR FOLGENDE KLINISCHE SITUATIONEN:

- Fehlende Nachbarzähne
- Fehlende Zahnhöcker
- Zahnisolation für Stumpfaufbau
- MOD-Füllungen

circumferential
matrix systems



polydentia
swiss manufacture 

polydentia.ch



neu!

myQuickmat

All-round

developed with **STYLE ITALIANO™**

embrace
simplicity

Testimonial



„Die moderne konservative Zahnmedizin braucht restaurative Lösungen, die unsere Verfahren vereinfachen und gleichzeitig für mehr Präzision und Effizienz sorgen. myQuickmat All-round ist hierfür ein gutes Beispiel. Es ermöglicht ein komfortables und unkompliziertes Vorgehen bei Seitenzahnrestaurationen, wodurch die Anatomie mit natürlichen Konturen und korrekten Kontaktpunkten wiederhergestellt wird.“

Dr. Jordi Manauta,
Italien



Bilder mit freundlicher Genehmigung von Dr. Jordi Manauta, Italien




Weitere
Informationen



The Wedge

Interdentalkaile, welche Steifigkeit und Elastizität verbinden und für eine optimale Anpassung der Matrize, selbst in konkaven Zonen sorgen.

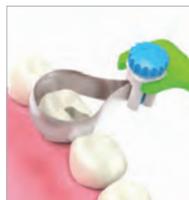

myQuickmat All-round ist ein Vollmatrizensystem, mit dem bei Seitenzahnrestaurationen die Anatomie von Zähnen mit fehlenden Strukturen wiederhergestellt werden kann. Die einfach zu handhabenden Quickmat All-round Matrizen ermöglichen Restaurationen mit einer natürlich geformten Anatomie und engen Kontaktoberflächen. Dank API, dem autoklavierbaren Platzierungsinstrument, geht die Positionierung der Quickmat All-round Matrizen mühelos von der Hand und ist stabil. API bietet Stabilität und verhindert ein Verrutschen der Spannschleife beim Spannen der Matrize. Mit dem myQuickmat All-round-Matrizen-System können Sie anspruchsvolle Fälle im Seitenzahnbereich bequem behandeln und in einem hindernisfreien, frei zugänglichen Operationsfeld arbeiten.

Kit



myQuickmat All-round introkit - REF 6850

- 2 Stk. API (Autoclavable Placement Instrument for Quickmat All-round)
- 15 Stk. Quickmat All-round Vollmatrizen, Prämolare 0,03 mm/5,5 mm
- 15 Stk. Quickmat All-round Vollmatrizen, Molare 0,03 mm/6,3 mm
- 45 Stk. The Wedge Interdentalkaile – sortiert

Nachfüllpackungen



REF 6851
API, Autoklavierbares Platzierungsinstrument für Quickmat All-round
2 Stk.

REF 6855
Quickmat All-round Vollmatrizen Prämolare – 0,03mm/5,5mm
35 Stk.

REF 6856
Quickmat All-round Vollmatrizen Molare – 0,03mm/6,3mm
35 Stk.

REF 7011
The Wedge Extrasmall (XS)
100 Stk.

REF 7012
The Wedge Small (S)
100 Stk.

REF 7013
The Wedge Medium (M)
100 Stk.

REF 7015
The Wedge Large (L)
100 Stk.

