

NEU

Variolink® Esthetic

Das ästhetische Befestigungscomposite

„Ästhetik leicht gemacht.
Grossartig!“




ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

Variolink® Esthetic


AUSSERGEWÖHNLICHE ÄSTHETIK

Variolink Esthetic ist das ästhetische, licht- und dualhärtende Befestigungscomposite zur definitiven Eingliederung anspruchsvoller Keramik- und Composite-Restaurationen. Das Konzept basiert auf den ästhetischen Befestigungscomposites Variolink II und Variolink Veneer, die sich seit Jahren im klinischen Einsatz bewährt haben.



Das Effekt-Farbkonzept

Um die Farbwirkung der Restaurationen präzise auf die Nachbarzähne abzustimmen, hat Ivoclar Vivadent das neue, ausgewogene und übersichtliche Effekt-Farbkonzept entwickelt. Die Farbe „Neutral“ sorgt dank ihrer hohen Transparenz für eine farbneutrale Befestigung der Restauration. Die Farben „Light“ und „Light+“ ermöglichen eine stufenweise Aufhellung; die Farben „Warm“ und „Warm+“ eine stufenweise Abdunkelung der darüber liegenden Keramik- und Composite-Restauration. Die Farben sind nach ihrer Wirkung benannt. Das erleichtert die Auswahl des zur klinischen Situation passenden Befestigungsmaterials.

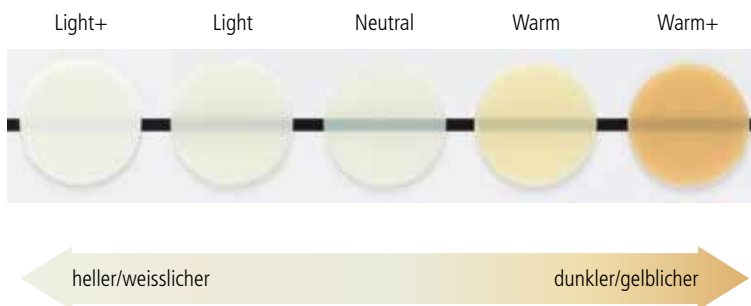


Exzellente Farbstabilität



Variolink Esthetic ist ausserordentlich farbstabil. Möglich macht das der patentierte, reaktive Lichtinitiator Ivocerin®, der zu 100 Prozent ohne aminhaltige Co-Initiatoren auskommt.

Variolink Esthetic bildet die Grundlage für langfristig überzeugende ästhetische Ergebnisse. Selbst bei intensiver Lichtbestrahlung und in feuchtem Milieu unterliegt Variolink Esthetic keiner sichtbaren Farbveränderung.

Abgerundet wird die aussergewöhnliche Ästhetik von Variolink Esthetic durch eine natürliche zahnähnliche Fluoreszenz. Das Befestigungscomposite weist zudem eine sehr gute Abrasionsbeständigkeit auf. Diese sorgt während der Liegedauer der Restauration für eine gute Randqualität.

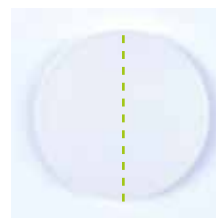

Variolink Esthetic
Suntest (gem. ISO4049),
linke Hälfte belichtet




Variolink Esthetic
Referenz
nach Wasserlagerung

ANWENDERFREUNDLICHE VERARBEITUNG

Leichte Überschussentfernung

Bisher galten adhäsive Befestigungscomposites bedingt durch eine diffizile Überschussentfernung als eher schwierig zu verarbeiten. Unter diesem Aspekt setzt Variolink Esthetic neue Massstäbe.

Dank einer intelligenten Kombination aus dem reaktiven Lichtinitiator Ivocerin und einem Licht-Controller lassen sich die Überschüsse nach erfolgter Lichtvorhärtung überdurchschnittlich gut entfernen. Bei der abschliessenden Lichtpolymerisation sorgt Ivocerin für eine schnelle und sichere Aushärtung von Variolink Esthetic.

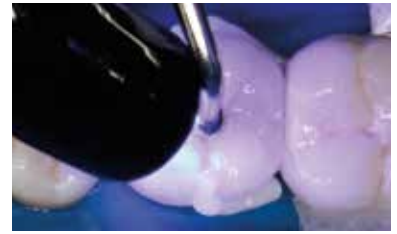


Flexible, situative Konsistenz

Der Viscosity Controller verbindet auf ideale Weise die gute Fließfähigkeit mit der Standfestigkeit von Variolink Esthetic. Das macht sich insbesondere beim Ausbringen aus der Spritze, beim Abfliessen des überschüssigen Materials aus dem Zementspalt und bei der Standfähigkeit der Überschüsse an der Zementfuge bemerkbar.

Überzeugende Röntgendiagnostik

Hinsichtlich Röntgenopazität führt Variolink Esthetic die Tradition des Vorgängers Variolink II fort. Die hohe Röntgenopazität erleichtert es, Zementüberschüsse oder Sekundärkaries zu erkennen.

Röntgenopazität [% AI]

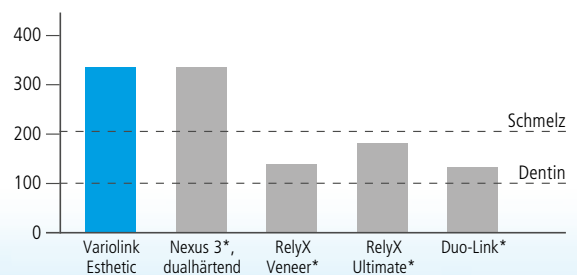

* Diese Marken sind keine eingetragenen Warenzeichen der Ivoclar Vivadent AG.
Quelle: F&E Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2014 (gemessen gemäss ISO 4049)


IM SYSTEM FÜR DEN KLINISCHEN ERFOLG



Optimales Bonden

Das Adhäsiv Adhese® Universal in der einzigartigen VivaPen®-Lieferform ergänzt Variolink Esthetic bei der Befestigung ästhetisch anspruchsvoller Restaurationen ideal. Adhese Universal lässt sich schnell und bequem im Mund applizieren. Es ist kompatibel mit allen Ätztechniken und erlaubt es, flexibel auf die jeweilige klinische Indikation zu reagieren. Das technik- und fehlertolerante Adhese Universal sorgt für konstant hohe Haftwerte und minimiert das Risiko postoperativer Sensibilitäten. Selbstverständlich kann Variolink Esthetic auch zusammen mit den bekannten Adhäsiven Syntac® und ExcITE® F verwendet werden.

Scherhaftung nach Dualhärtung – Self-Etch-Technik auf Schmelz und Dentin nach 10'000 Zyklen Thermocycling

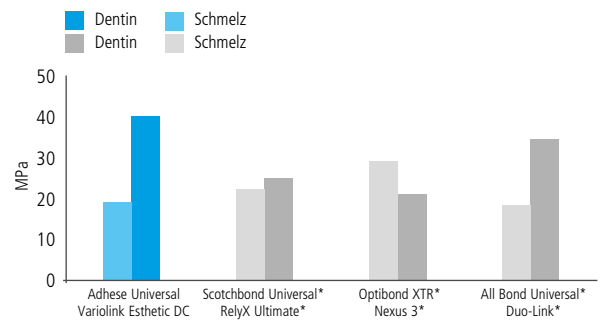


* Diese Marken sind keine eingetragenen Warenzeichen der Ivoclar Vivadent AG.
Quelle: F&E Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2014

Bewährter Verbund zur Restauration

In Verbindung mit dem innovativen und klinisch bewährten Universalprimer Monobond® Plus erzielt Variolink Esthetic eine ausgezeichnete Haftung auf Restaurationen aus Glaskeramik wie zum Beispiel IPS e.max® CAD/Press oder IPS Empress® CAD/Esthetic. Daneben sorgt die patentierte Kombination von funktionellen Methacrylaten auch bei Restaurationen aus Composite oder Oxidkeramik für einen guten und dauerhaften Verbund.



Zughaftung auf die IPS e.max (LS₂)-Glaskeramik initial und nach Alterung

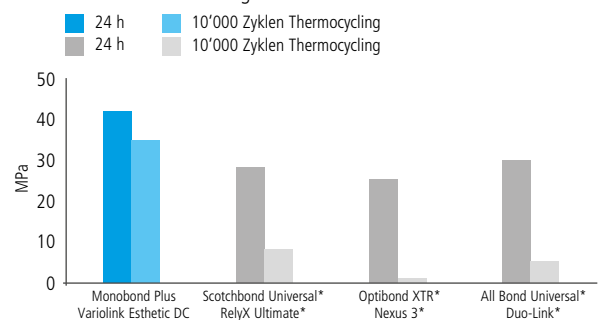

* Diese Marken sind keine eingetragenen Warenzeichen der Ivoclar Vivadent AG.
Quelle: F&E Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2014

LIEFERFORMEN



Variolink Esthetic LC System Kit (rein lichthärtend)

- 3 Spritzen Variolink Esthetic LC, 2 g (light, neutral, warm)
- 3 Spritzen Variolink Esthetic Try-In-Paste, 1,7 g (light, neutral, warm)
- 1 Spritze Total Etch, 2 g
- 1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml, oder 1 Flasche, 5 g
- 1 Flasche Monobond Plus, 5 g
- 1 Spritze Liquid Strip, 2,5 g
- Diverses Zubehör

- 666433WW mit Adhese Universal VivaPen, 2 ml
- 666065WW mit Adhese Universal Flasche, 5 g

Variolink Esthetic DC System Kit (dualhärtend)

- 3 Automixspritzen Variolink Esthetic DC, 5 g (light, neutral, warm)
- 3 Spritzen Variolink Esthetic Try-In-Paste, 1,7 g (light, neutral, warm)
- 1 Spritze Total Etch, 2 g
- 1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml, oder 1 Flasche, 5 g
- 1 Flasche Monobond Plus, 5 g
- 1 Spritze Liquid Strip, 2,5 g
- Diverses Zubehör

- 666434WW mit Adhese Universal VivaPen, 2 ml
- 666125WW mit Adhese Universal Flasche, 5 g

Variolink Esthetic LC Refill (rein lichthärtend)

- 1 Spritze, 2 g (in der gewählten Farbe)
- 5 Applikationskanülen
- 666126WW Light+
- 666127WW Light
- 666128WW Neutral
- 666129WW Warm
- 666130WW Warm+

Variolink Esthetic DC Refill (dualhärtend)

- 1 Automixspritze, 5 g (in der gewählten Farbe)
- 10 Mischkanülen
- 666117WW Light+
- 666118WW Light
- 666119WW Neutral
- 666120WW Warm
- 666121WW Warm+

Variolink Esthetic DC Refill (dualhärtend)

- 1 Automixspritze, 9 g (in der gewählten Farbe)
- 15 Mischkanülen
- 666122WW Light
- 666123WW Neutral
- 666124WW Warm

Variolink Esthetic Try-In-Paste Refill

- 1 Spritze, 1,7 g (in der gewählten Farbe)
- 5 Applikationskanülen
- 666067WW Light+
- 666113WW Light
- 666114WW Neutral
- 666115WW Warm
- 666116WW Warm+

Zubehör

- 645951 Mixing Tips kurz spitz, Refill, 15 Stück
- 559224 Applikationskanülen Variolink, Refill, 20 Stück



Der Weg aus dem Befestigungslabyrinth

Das **Cementation Navigation System**, die neue Multimedia-Applikation von Ivoclar Vivadent, bietet Zahnärzten eine praktische Orientierungs- und Entscheidungshilfe bei Befestigungsfällen.

www.cementation-navigation.com



Festsitzende Prothetik

Variolink® Esthetic ist ein Produkt aus der Kategorie „Festsitzende Prothetik“. Produkte aus dieser Kategorie decken den Prozessablauf bei der Fertigung der festsitzenden Prothetik ab – von der provisorischen Versorgung bis zur Pflege der Restauration. Die Produkte sind optimal aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine erfolgreiche Verarbeitung und Anwendung.



DIES SIND WEITERE PRODUKTE AUS DIESER KATEGORIE:

IPS e.max® System

all ceramic – all you need



Eine Gesamtlösung für alle Indikationen

- Hochfeste und hochästhetische Materialien für Press- und CAD/CAM-Technologie
- Einzigartiges Lithium-Disilikat (LS₂) und Zirkoniumoxid (ZrO₂): vom dünnen Veneer bis zur weitspannigen Brücke
- Flexible Befestigung: adhäsiv, selbstadhäsiv und konventionell

Fluor Protector S

Der fluoridhaltige Schutzlack



Der homogene Schutzlack in der Dosiertube

- Sofortige Schmelzfluoridierung
- Ergiebige Fluoriddepot
- Milder Geschmack

Sie wollen mehr über Produkte aus der Kategorie „Festsitzende Prothetik“ wissen? Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner von Ivoclar Vivadent oder informieren Sie sich auf: www.ivoclarvivadent.com

Hersteller und Vertrieb
Ivoclar Vivadent AG
 Bendererstr. 2
 9494 Schaan
 Liechtenstein
 Tel. +423 235 35 35
 Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland
Ivoclar Vivadent GmbH
 Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
 D-73479 Ellwangen, Jagst
 Tel. +49 7961 8890
 Fax +49 7961 6326
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

673399/2014-08-12/de

ivoclar
vivadent[®]
 passion vision innovation