


Tetric EvoFlow®

Das Flow-Composite



**Fließfähig, wenn gewünscht.
Standfest, wenn erforderlich.**

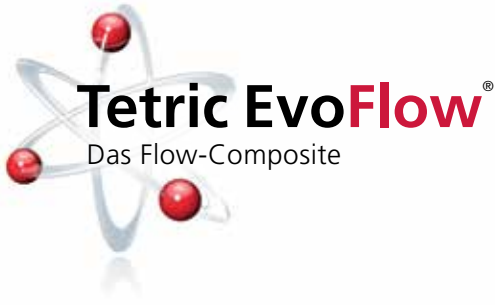

Bewährtes im neuen Design

Fliessfähige Composites sind aus der restaurativen Zahnmedizin nicht mehr wegzudenken. Sie helfen dort, wo ein gutes Anfließverhalten gewünscht ist. Hier setzt auch Tetric EvoFlow® an. Das in Europa meistverkaufte Flow-Composite in der beliebten Konsistenz ist ab sofort in einer neuen ergonomischen Lieferform erhältlich. In bewährter Qualität, wie auch Dr. Eduardo Mahn, Director Clinical Research, Universidad de los Andes, Santiago, Chile, feststellt:



Dr. Eduardo Mahn


„Bei anspruchsvollen Fällen kann ich mich auf die gute Fließfähigkeit und die passende Standfestigkeit von Tetric EvoFlow verlassen. Ästhetisch hochwertige Ergebnisse sind dank der angenehmen Verarbeitung mit diesem Composite möglich.“



Bilder: Dr. Eduardo Mahn, Santiago, Chile

Tetric EvoFlow ist ein Produkt aus der Tetric-Linie. Ob modellierbar oder fließfähig – Produkte aus dieser Linie bieten für jede Composite-Indikation die passende Lösung.

MODELLIERBAR		FLIESSFÄHIG
Schichttechnik	Bulk-Technik	Schichttechnik
Tetric EvoCeram® Das Composite Das millionenfach bewährte Composite in 4 Dentin-, 14 Enamel- und 4 Bleach-Farben	Tetric EvoCeram® Bulk Fill Das Bulk-Composite Das effiziente und ästhetische 4-mm-Bulk-Fill-Composite für den Seitenzahnbereich in 3 Farben	Tetric EvoFlow® Das Flow-Composite 3 neue Farben Das bewährte und fließfähige Composite in 3 Dentin-, 8 Enamel- und 3 Bleach-Farben

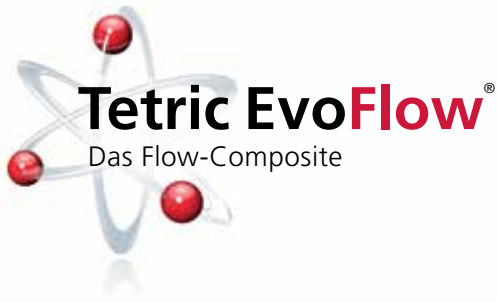

Tetric EvoFlow®

Das Flow-Composite

Neues im Überblick

Tetric EvoFlow ist in zwei Darreichungsformen erhältlich: Als Cavifil mit extra dünner Spitze für die Einmalverwendung und als Spritze. Dank des neuen ergonomischen Designs der Spritze liegt sie jetzt besonders gut in der Hand.

Für eine punktgenaue Applikation wurde Tetric EvoFlow mit einer 0,9-mm-Metallkanüle ausgestattet. Gerade auch für die minimalinvasive Versorgung kleinster, schwer zugänglicher Kavitäten ist diese feine Kanüle ideal. Sie lässt sich mittels Luerlocksystem leicht aufdrehen und schliesst am Übergang gut ab. Das erleichtert die hygienische Reinigung der Spritze.



Cavifil mit extra dünner Spitze

Guter Abschluss der neuen Kanüle

Farbbezeichnung gut sichtbar

Neue, feine 0,9-mm-Applikationskanüle für punktgenaue Applikation


Ergonomische Griffmulde

Bewährtes Farbkonzept neu erweitert

Die bewährte Farbpalette wird nun um drei zusätzliche Farben ergänzt: B1 Enamel, A2 Dentin und B2 Dentin. Für besonders helle Zähne eignet sich die neue Farbe B1. Dank der naturnahen Opazität können die Dentinmassen zum Abdecken von leichten Verfärbungen im Seitenzahnbereich eingesetzt werden.


Tetric EvoFlow lässt sich mit anderen Composites wie Tetric EvoCeram® und Tetric EvoCeram® Bulk Fill ideal kombinieren und kann als erste Schicht unter normalviskosen Composites angebracht werden.



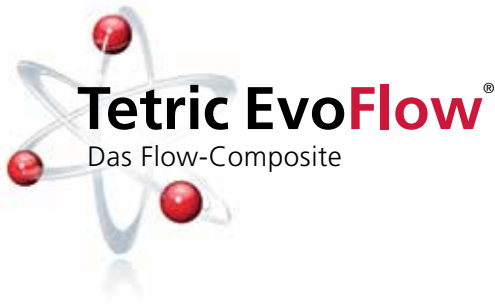

Sehr gute Röntgensichtbarkeit

Die gute Röntgensichtbarkeit eines Füllungsmaterials ist Voraussetzung für eine Diagnose von Sekundärkaries. Tetric EvoFlow zeigt eine hohe Röntgensichtbarkeit von 360 % Al und erleichtert somit eine sichere Unterscheidung zwischen Zahnhartsubstanz und Füllungsmaterial.

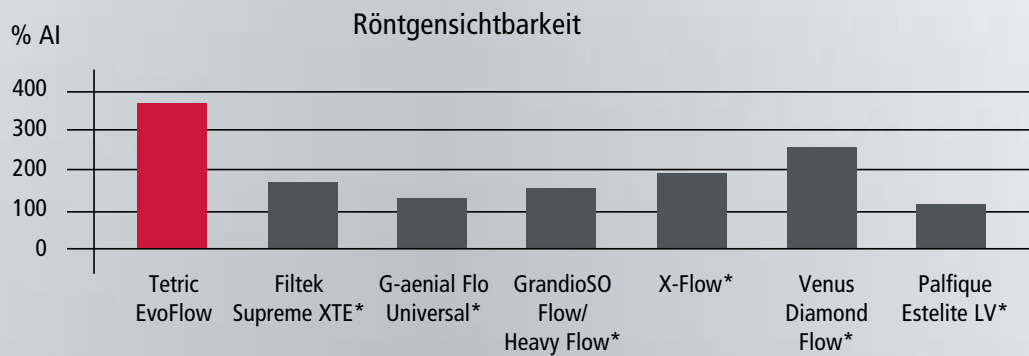

F&E Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2012 (gemessen gemäss ISO 4049).

*Diese Marken sind keine eingetragenen Warenzeichen der Ivoclar Vivadent AG.



Fließfähig und standfest zugleich

Optimales Anfließverhalten und gleichzeitig ausreichende Standfestigkeit sind die herausragenden Eigenschaften von Tetric EvoFlow. Es fließt dorthin, wo es gebraucht wird und ist standfest, wenn erforderlich. Der Viscosity Controller ermöglicht diese Eigenschaft, da die Fließfähigkeit beim Ausdrücken reguliert wird.

Auch in schwer zugänglichen Bereichen bleiben keine Hohlräume unter der Restauration zurück.



Ausgangssituation: Applikation von Tetric EvoFlow (links), SDR Flow* (Mitte) und Palfique Estelite LV* (rechts) auf eine senkrechte Glasplatte.



Ergebnis nach fünf Minuten.

F&E Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2012.

*Diese Marke ist kein eingetragenes Warenzeichen der Ivoclar Vivadent AG.

Die ideale Konsistenz für alle Indikationen



Erste Schicht/Liner unter normalviskosen Composites der Klasse I bis V, z.B. Tetric EvoCeram/ Tetric EvoCeram Bulk Fill.



Erweiterte Fissurenversiegelung.



Kleine Füllungen jeglicher Art (Klasse III und V).

Vorteile auf einen Blick

- ▶ Fließfähig, wenn gewünscht. Standfest, wenn erforderlich.
- ▶ Die ideale Konsistenz für alle Composite-Indikationen.
- ▶ Das meistverkaufte fließfähige Composite in Europa.
- ▶ Das bewährte Farbkonzept erweitert um drei neue Farben.

Tetric-Lieferformen im Überblick

Tetric EvoFlow

Spritzen

Assortment 8 x 2 g

1 x A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, A3.5 Dentin, T
1 x Tetric EvoFlow-Farbschlüssel
40 x 0,9-mm-Kanülen

Refill à 1 x 2 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, B3
T, A3.5 Dentin,
Bleach XL, Bleach L, Bleach M
je 5 x 0,9-mm-Kanülen
Neu: B1, A2 Dentin, B2 Dentin, 0,9-mm-Kanülen
Farbschlüssel mit allen 14 Farben

Cavifils

Assortment à 40 x 0,2 g

5 x A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, A3.5 Dentin, T
1 x Tetric EvoFlow-Farbschlüssel

Refill à 20 x 0,2 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, B3
T, A3.5 Dentin,
Bleach XL, Bleach L, Bleach M
Neu: B1, A2 Dentin, B2 Dentin

Tetric EvoCeram

Spritzen

Assortment 8 x 3 g

1 x A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, C3, D3
1 x Tetric EvoCeram-Farbschlüssel

Refill à 3 x 3 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2,
D3, A2 Dentin, A3.5 Dentin, A4 Dentin, B2 Dentin,
T, Bleach XL, Bleach L, Bleach I, Bleach M

Refill à 1 x 3 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2,
D3, A2 Dentin, A3.5 Dentin, A4 Dentin, B2 Dentin,
T, Bleach XL, Bleach L, Bleach I, Bleach M
Farbschlüssel mit allen 22 Farben

Cavifils

Assortment à 40 x 0,2 g

5 x A1, A2, A3, A3.5, A4, B3, C3, D3
1 x Tetric EvoCeram-Farbschlüssel

Refill à 20 x 0,2 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3,
A2 Dentin, A3.5 Dentin, A4 Dentin, B2 Dentin, T,
Bleach XL, Bleach L, Bleach I, Bleach M

Tetric EvoCeram Bulk Fill

Spritzen

Refill à 1 x 3 g, 3 x 3 g

IVA, IVB, IVW

Farbschlüssel mit allen 3 Farben

Cavifils

Refill à 20 x 0,2 g

IVA, IVB, IVW



Dies ist ein Produkt aus unserem
Kompetenzbereich „Composites“.
Produkte aus diesem Bereich sind
jeweils optimal aufeinander abgestimmt.

Hersteller und Vertrieb
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland
Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Tel. +49 (0) 79 61 / 8 89-0
Fax +49 (0) 79 61 / 63 26
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de


ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation